


機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000  
**エンテラ キュアリングユニット**

【形状・構造及び原理等】

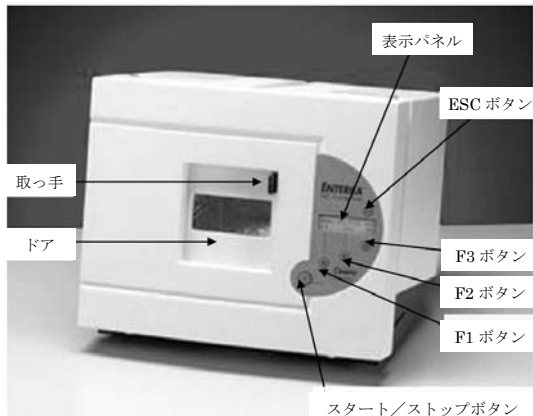

- 形状・構造  
本体寸法 : 305(H)×343(W)×330(D)mm  
本体重量 : 約 10.9kg
- 電氣的定格  
\* 電源 : 100-120V  
周波数 : 50-60Hz  
\* 消費電力 : 450W

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置である。

【操作方法又は使用方法等】

詳細な操作方法については、取扱説明書をご参照下さい。

- 本体を操作して重合プログラムを選択して下さい。
- 通法に従って作業模型に築盛したレジンを、ターンテーブルに乗せて下さい。
- スタートボタンを押し、重合を開始して下さい。
- 重合後、ターンテーブルからレジンを取り出して下さい。
- 操作終了後は電源をお切り下さい。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 可燃性物質付近や、本体の上に物を載せた状態で使用しないこと。
- 接地線（アース）を正しく接続すること。
- トング等の器具で本体を操作しないこと。
- 本体及び作業模型は高温になるので、操作中及び操作後の取扱に注意すること。
- 定格 15A 以上のコンセントを使用し、延長コードは使用しないこと。
- チャンパー内のテーブルに 450g 以上の物を乗せないこと。
- 使用するレジン材料の取扱説明書を参照すること。
- 電球は高温になるので直接触れないこと。
- 操作終了後は必ず本体の電源を切ること。
- 長期間機器を使用しない場合は、本体の電源コードを抜くこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に取扱説明書を必ず読むこと
- 本体は、屋内で使用する事。
- 感電、その他の危険の為、カバーなどをあけ、本体内部に触れないこと。
- 本体は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 本体は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 電源コードのソケットやコンセントに負担がかからない場所に本体を設置すること。また、コンセントの差込み口を塞がないように配置すること。
- 本体の上に物を置かないこと。また、背面のファンを塞がないこと。
- 傾斜、振動等の影響のない場所に配置すること。
- 周囲から 15cm 以上離れた場所に配置すること。
- 挿入口が塞がれることのないように配置すること。

【保守・点検に係る事項】

- 故障の際は、修理業者に修理を依頼すること。
- 本体及び部品は必ず定期点検を行うこと。点検の際は電源コードを接続しないこと。
- 1 ヶ月に 1 回程度、過熱防止のためにカバーを開けてファンと通気口を清掃すること。
- 本体を少なくとも週 1 回以上、清掃すること。
  - コントロールパネルを清掃する際は、液体クリーナーや溶剤を使用しないこと。
  - コントロールパネル以外の外面は、中性洗剤や水で湿らせた柔らかい布で清掃すること。
  - 金属面及びテーブルは変性アルコール又はガラスクリーナーで湿らせた柔らかい布で清掃すること。
  - 本体を浸水させないこと。

【包装】

- \* 1. セット
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 本体                      | 1 |
| スペアランプ（予備電球）3 個入り グローブ付 | 1 |
| 電源コード                   | 1 |
2. 交換用部品
- (1) 予備電球 3 個入(グローブ付)
- \* (2) 5.0A ヒューズ (1 個)
- (3) 2.5A ヒューズ (1 個)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 デンツプライ三金株式会社  
住所 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

製造国 アメリカ合衆国  
製造元 デンツプライ インターナショナル プロステティクス社  
Dentsply International Prosthetics

【問い合わせ窓口】

カスタマー・サービス・センター  
電話番号 0120-789-123  
FAX 番号 0120-789-129

取扱説明書を必ずご参照下さい。